



ACRY ROCK V

DENTI ARTIFICIALI IN RESINA
ACRYLIC TEETH



ruthinium.it



Importers & Dealers in Quality Dental Goods

ACRY ROCK V

DUREZZA NATURALE
NATURAL HARDNESS

Ar

Acry Rock

2
STRATI
LAYERS

DENTI IN RESINA
ACRILICA (PMMA)
TEETH IN ACRYLIC
RESIN (PMMA)

NATURALEZZA
NATURALNESS

AMPIO ASSORTIMENTO DI FORME E COLORI
WIDE ASSORTMENT OF SHAPES AND COLORS



Buona resistenza chimico-fisica

Il vasto assortimento di forme e tinte lo rendono adattabile a qualsiasi esigenza protesica. Gamma di 19 tinte, 32 forme di incisivi superiori, 19 incisivi inferiori, 22 molari.

Good chemical and physical resistance

The wide range of shapes and shades make it adaptable to any prosthetic need. Range of 19 shades, 32 upper incisor shapes, 19 lower incisors, 22 molars.



ALTA QUALITÀ
HIGH QUALITY

RESISTENTE ALL'ABRASIONE
E ALL'ADESIONE DELLA PLACCA
RESISTENCE TO ABRASION
AND PLAQUE ADHESION


DUREZZA
HARDNESS

OTTIMA CHIMICA E RESISTENZA
FISICA DOVUTO ALL'USO DI
MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
GOOD CHEMICAL AND PHYSICAL
RESISTANCE DUE TO THE USE OF
HIGH-GRADE MATERIALS

 Legame Cross Linked tra catene molecolari
Cross-Linked bond between molecular chains

 Legame polimerico tra monomeri
Polymer bond between monomers

 Unità di monomero
Monomer unit

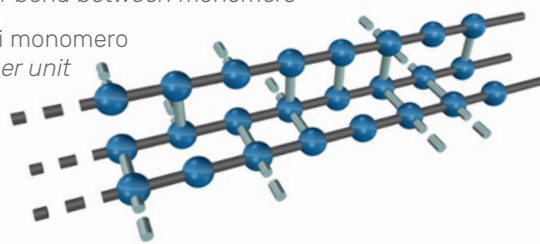

L'utilizzo di polimeri ad alto peso molecolare modificati, combinati con particolari leganti molecolari (Cross Linking), conferisce:

Durezza elevata
Eccellente resistenza all'abrasione
Stabilità del colore
Ottima resistenza all'adesione di placca

The use of high molecular weight modified polymers combined with special molecular linkers (Cross Linking) gives:

Exceptional hardness
Excellent abrasion resistance
Color stability
Excellent resistance to plaque adhesion


Determinazione della forma / Establishing the shape

Secondo Williams:

Forma dei denti scelta in funzione della forma del viso.

According to Williams:

The shape of the teeth is chosen according to the shape of the face.

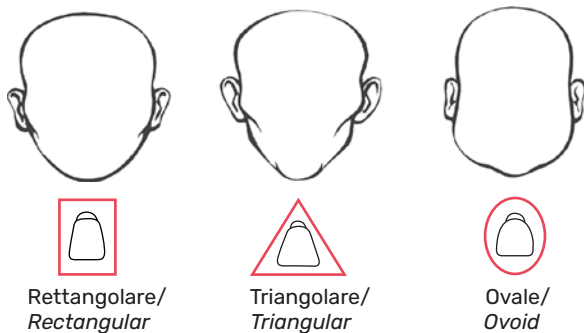

Secondo Gerber:

La forma e la posizione degli anteriori è determinata dalla linea basale del naso.

According to Gerber:

The shape and position of the front teeth is established by the basal line of the nose.




Secondo la forma delle creste alveolari:

Se non vengono forniti riferimenti secondo le classificazioni precedenti, la forma della cresta alveolare superiore può fornire informazioni sulla forma dei denti da utilizzare.

According to the shape of the alveolar crest:

If no references are provided according to the previous classifications, the shape of the upper alveolar crest can provide information on the shape of teeth to be used.

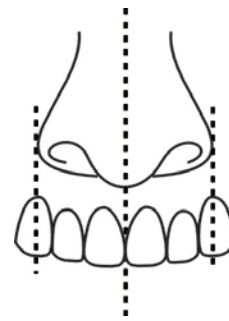

Scelta dei gruppi incisivi

Determinazione della larghezza del gruppo anteriore secondo la ricerca di Lee.

Selecting the incisor groups

Establishing the width of the anterior group according to Lee's research.

La linea verticale immaginaria che tocca i margini delle pinne nasali attraversa l'asse dei canini.

The imaginary vertical line that touches the margins of the pinna passes through the axis of the canines.



La larghezza centrale è data dalla larghezza del laterale sommata alla parte mesiale del canino.

The central width is given by the lateral added to the mesial part of the canine.

Fluorescenza / Fluorescence

La fluorescenza è una particolare forma di luminescenza presente in alcune sostanze. Questa caratteristica è presente nei denti naturali che, quando colpiti da radiazioni ultraviolette prossime al visibile, emettono una luce di colore bianco-azzurro. In tutti i denti Ruthinium tale caratteristica è presente, per conferire un effetto ancora più naturale.

Fluorescence is a form of luminescence that is found in certain substances. It is a feature that is found in natural teeth which, when struck by ultraviolet rays, give off a white-bluish light. This characteristic is present in all Ruthinium teeth to give them an even more natural look.



CODICE PRODOTTO/ PRODUCT CODE

0010013	ACRY ROCK V 6 UPPER
0010014	ACRY ROCK V 6 LOWER
0010015	ACRY ROCK V 8 UPPER
0010016	ACRY ROCK V 8 LOWER
0020003	ACRY ROCK V SET 28
0030002	SHADE GUIDE ACRY ROCK V
0020004	LIVE MOULD CHART ACRY ROCK V

INCISIVI SUPERIORI / UPPER INCISIVES




Rettangolare/
Rectangular



Triangolare/
Triangular



Ovale/
Ovoid




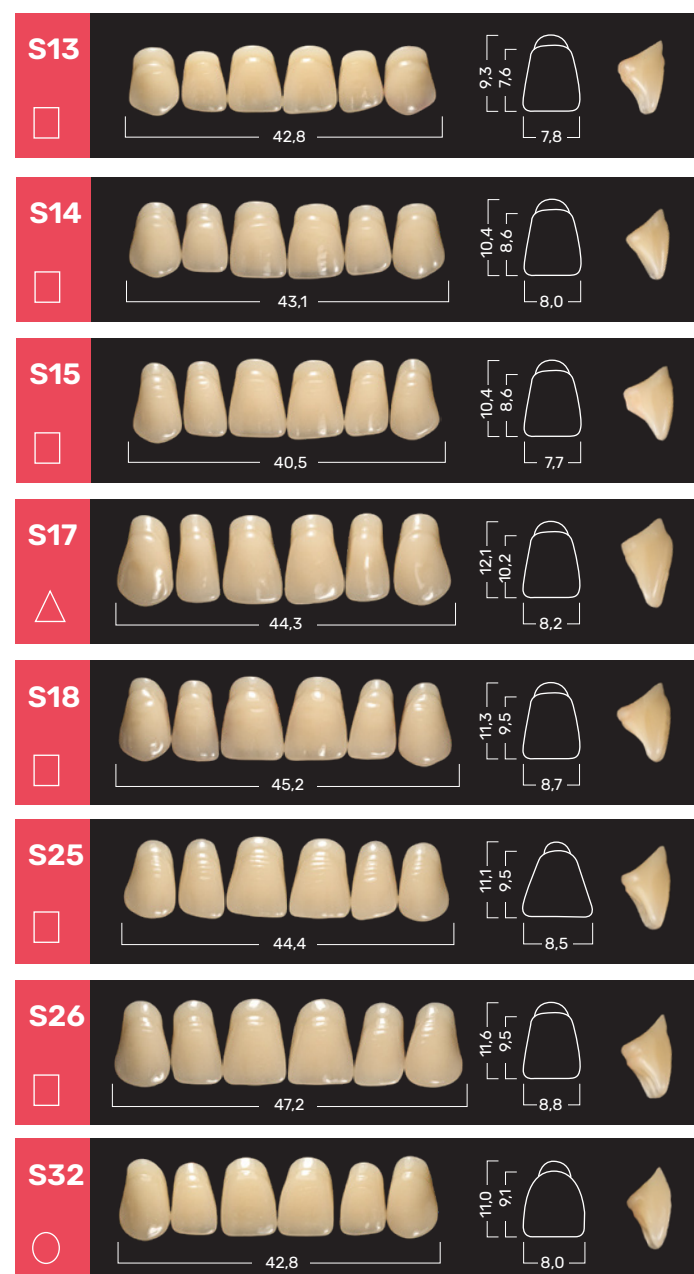


SCALA COLORI / SHADE GUIDE

ACRYROCK V

BLEACH	BL
WHITE	A1 - B1
WHITE PINK	A2
WHITE LIGHT YELLOW	A3 - D4 - E1
PINK YELLOW	A3,5
YELLOW	B3 - B4 - F1
YELLOW ORANGE	F2
YELLOW GREY	C2
BROWN	A4
WHITE GREY	C1 - B2 - D2
GREY	D3 - C3 - C4



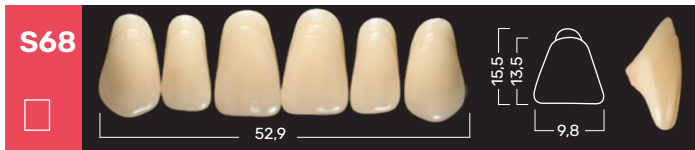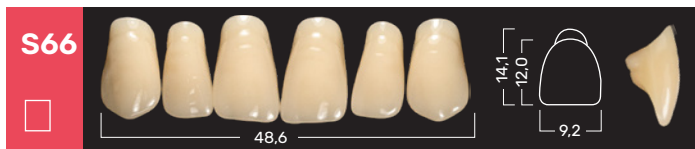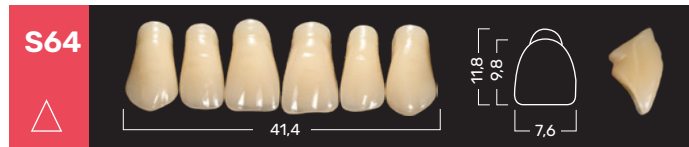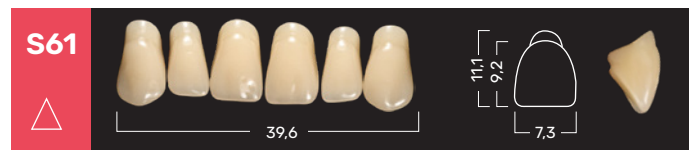

INCISIVI INFERIORI / LOWER INCISIVES


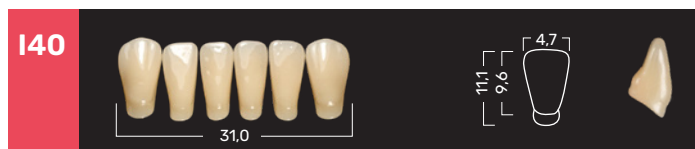


TABELLA DI ARTICOLAZIONE* / ARTICULATION TABLE*

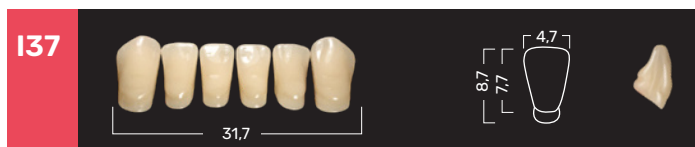

S13	I13	D35
S14	I13	D35
S15	I38	D37 D43
S17	I41	D39 D44
S18	I18	D39 D44
S25	I18	D39
S26	I46	D39 D45
S32	I41 I42	D39 D44
S33	I46	D45
S37	I37	D36 D42
S38	I38	D37 D43
S39	I51	D35
S40	I40	D36 D42
S41	I41	D39 D44
S42	I42	D39 D44
S47	I18 I53	D39
S48	I46	D45
S51	I51	D35
S52	I52	D36 D42
S53	I53	D39 D44
S54	I53	D39 D44
S55	I66	D45 D46
S56	I46	D45
S60	I60	D33
S61	I61	D36 D42
S62	I61	D36 D42
S63	I63	D39 D44
S64	I64	D41
S65	I65	D41
S66	I66	D44
S67	I67	D45
S68	I68	D46

*Le combinazioni sono indicative. La tipologia del montaggio e il caso clinico possono richiedere combinazioni diverse.
*Combinations are indicative. Mounting type and clinical case may require different combinations.

DIATORICI INFERIORI E SUPERIORI / UPPER AND LOWER DIATORS



Molari Geometrici e Anatomici








I geometrici sono denti costruiti in base alle ricerche di Starck per la costruzione della protesi bilanciata bilaterale. Angolo cuspace di 20°. Gli anatomici sono denti caratterizzati da anatomia accentuata per garantire modificabilità per l'impiego in tutte le tecniche di montaggio. Angolo delle cuspidi: 25°-33°.

Geometrics and Anatomicals Molars

Geometrics are teeth constructed according to Starck's research for constructing bilateral balanced dentures. Cusp angle 20°. Anatomicals are teeth characterized by anatomy accentuated to ensure modifiability for use in all mounting techniques. Cusp angle: 25°-33°.

G Geometrico / Geometric

A Anatomico / Anatomic

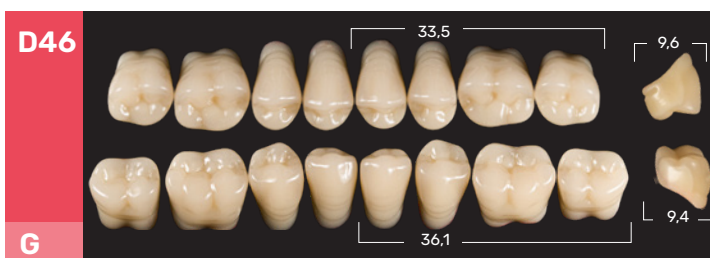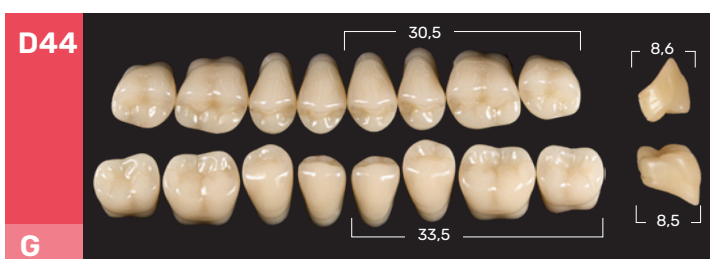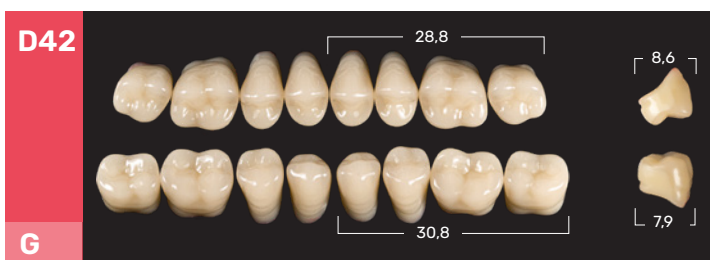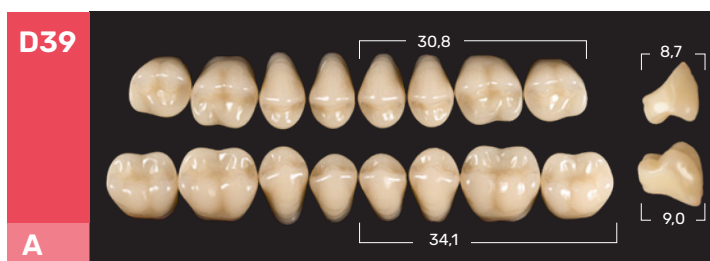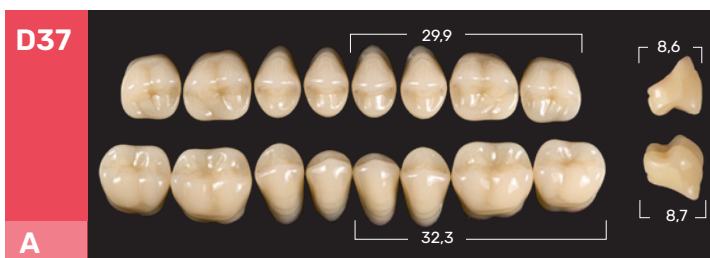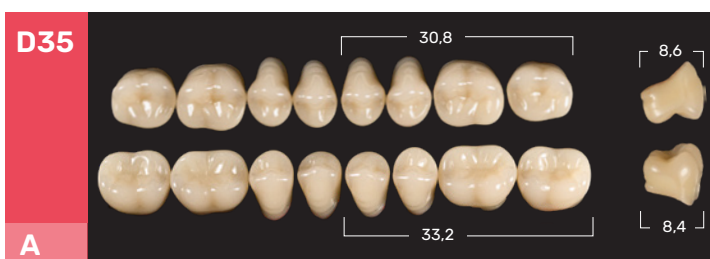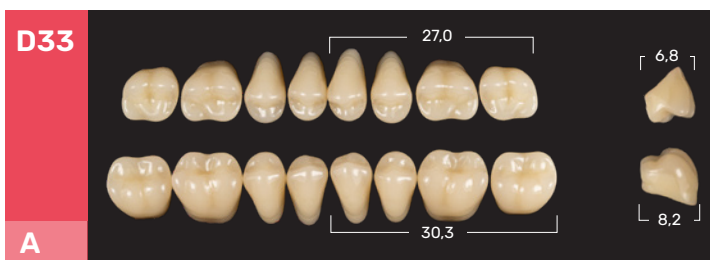



Importers & Dealers in Quality Dental Goods

📍 1102 Embassy Chambers, 3rd Road, Khar West, Mumbai - 400052, India
☎ +91 22 6127 7777 📞 +919930006127 ✉ sales@nkpatelandsons.com
🌐 www.nkpatelandsons.com 📺 @nkpatelandsons 📷 /nkpatelandsons